



15 mm 尺規卡 (15 mm x 15 mm)
量度黑框外沿 = 15 mm

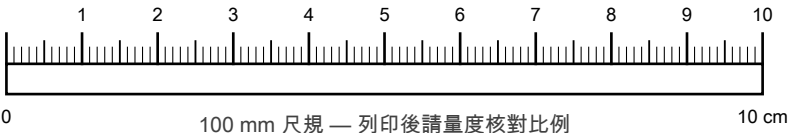

Print at 100% actual size — no fit-to-page. 以 100% 實際大小列印，勿縮放。

10 mL 針筒側視圖 Syringe side-view guide

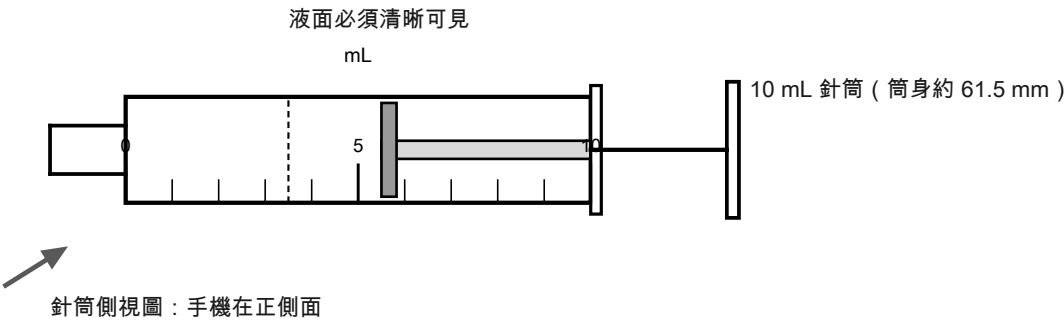

IDDSI-Open Capture Kit — 2/2

IDDSI-Open 拍攝指引 (繁體中文)

列印說明：請以 100% 實際大小列印本頁及尺規卡頁（不要「縮放至符合頁面」），並用第 1 頁的 100 mm 尺規核對列印比例；尺規不符請重新列印。

一、手機設定與穩定

1. 使用後置主鏡頭，1080p / 30 fps；關閉美顏、濾鏡、人像模式、數碼變焦及水印。
2. 電話以固定支架或穩定雙手持機，保持水平穩定；拍攝途中不要切換鏡頭或移動機位。

二、照明與背景

3. 使用均勻白光或自然光，照明充足；避免背光、強反光及深色陰影。
4. 背景乾淨整潔：只拍食物、測試工具及尺規卡，移走雜物；不要拍任何人的臉、名牌、病歷或可識別個人的資料。

三、尺規卡 (15 mm 尺規卡)

5. 把第 1 頁印出的 15 mm 尺規卡放在樣本旁邊同一平面，拍攝時尺規卡必須完整入鏡，並與鏡頭平面平行，作為比例基準。

四、針筒側視圖 (飲品 L0–L4 流動測試)

6. 只用項目指定的 10 mL 針筒（筒身約 61.5 mm）；手機固定在針筒正側面，拍攝針筒側視圖：針筒垂直、刻度無遮擋、液面清晰可見。
7. 先拍到準確 10 mL 起始量；完全放開下端時為 0 秒，連續拍攝至少 12 秒，不得暫停、剪接或加速。

五、每個樣本一段影片

8. 一個檔案只拍一個製備 / 測試事件；一個樣本一段完整影片，不要把多個樣件混在同一段影片。照片用 1x、45° 向下拍，餐碟、食物及標準餐叉完整入鏡。

六、核對與上傳

9. 拍完即檢查對焦、比例尺、測試起點及終點是否完整；失焦、遮擋或不完整便重拍，不要自行補寫結果或猜測級別（標記 REVIEW）。
10. 原檔當日上傳，不經即時通訊軟件、不壓縮、不剪片。